

# 岛津气相色谱工作站批量打印报告、批量导出 PDF 格式的报告

阚士超

(新泰市检验检测中心, 山东 泰安 271200)


样品跑完, 数据算完, 都要打印纸质的样品数据报告, 如果只有几个样品, 可以挨个手动打印数据报告。如果有十几个或者几十个样品, 挨个打印纸质报告, 效率就太低了。

岛津气相色谱工作站有一个功能是批处理再解析, 批处理再解析可以批量对数据文件进行处理。这篇文章(<https://bbs.instrument.com.cn/topic/8248252>)介绍了批处理再解析快速处理数据的功能。其实批处理再解析还有一个功能就是批量打印报告。


|        | 数据文件          | 级别号 | 输出报告                     | 报告格式文件                     |
|--------|---------------|-----|--------------------------|----------------------------|
| l. gom | 百菌清0.1-7. god | 1   | <input type="checkbox"/> | lutions\System\DEFAULT.lsr |
| l. gom | 百菌清0.1-2. god | 1   | <input type="checkbox"/> | lutions\System\DEFAULT.lsr |
| l. gom | 百菌清0.1-3. god | 1   | <input type="checkbox"/> | lutions\System\DEFAULT.lsr |
| l. gom | 百菌清0.1-4. god | 1   | <input type="checkbox"/> | lutions\System\DEFAULT.lsr |
| l. gom | 百菌清0.1-5. god | 1   | <input type="checkbox"/> | lutions\System\DEFAULT.lsr |
| l. gom | 百菌清0.1-6. god | 1   | <input type="checkbox"/> | lutions\System\DEFAULT.lsr |

首先打开“批处理再解析”, 然后打开批处理文件, 选择报告对应的报告格式文件, 再勾选批处理序列中的“输出报告”功能。这时候保存批处理, 再点击“再解析”, 这时候就会把批处理里面的数据文件对应的纸质报告打印出来。

批处理再解析功能还可以批量输出 PDF 格式的数据报告, 首先设置打印机, 将对应的打印机修改为虚拟打印机。岛津气相色谱工作站软件安装的时候自动安装了虚拟主机打印机, 就是 SkyPDF Pro Driver。如果没有 SkyPDF Pro Driver, 可以安装 Wps, 使用 Wps 的虚拟打印机功能效果要差一些, 需要挨个手动保存 PDF。

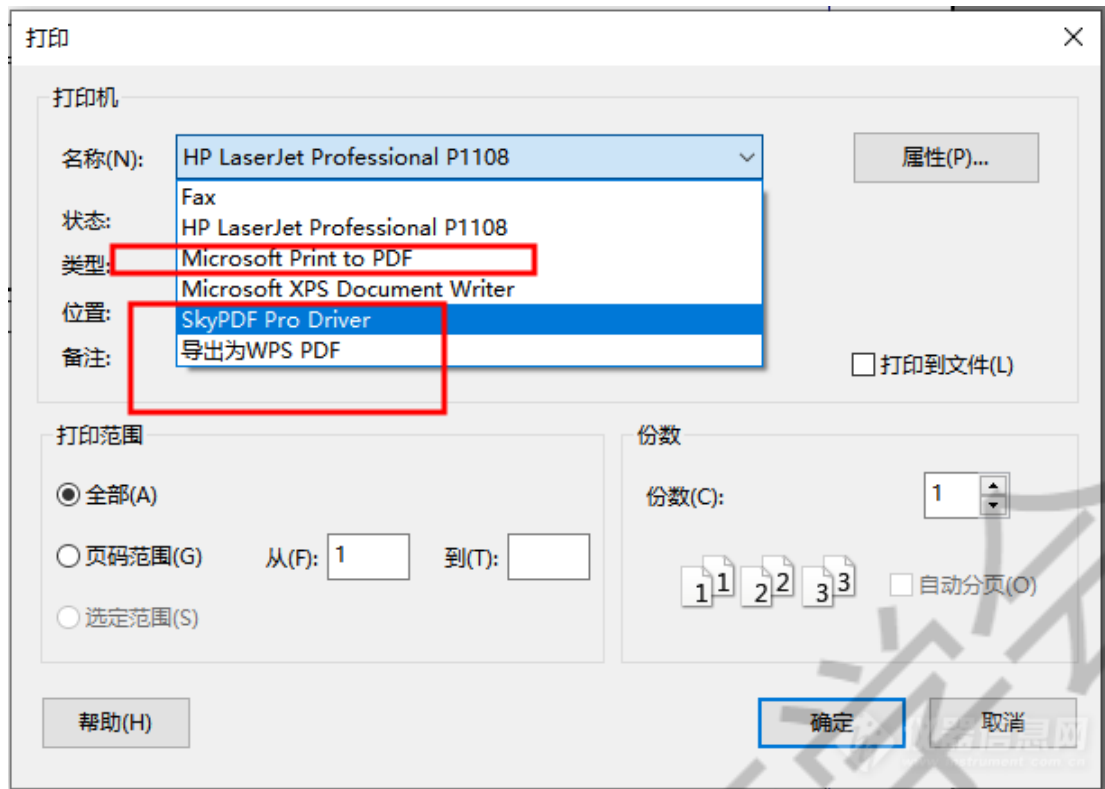

如图选择“SkyPDF Pro Driver”，这时候再启用正常使用批处理再解析功能就可以了。

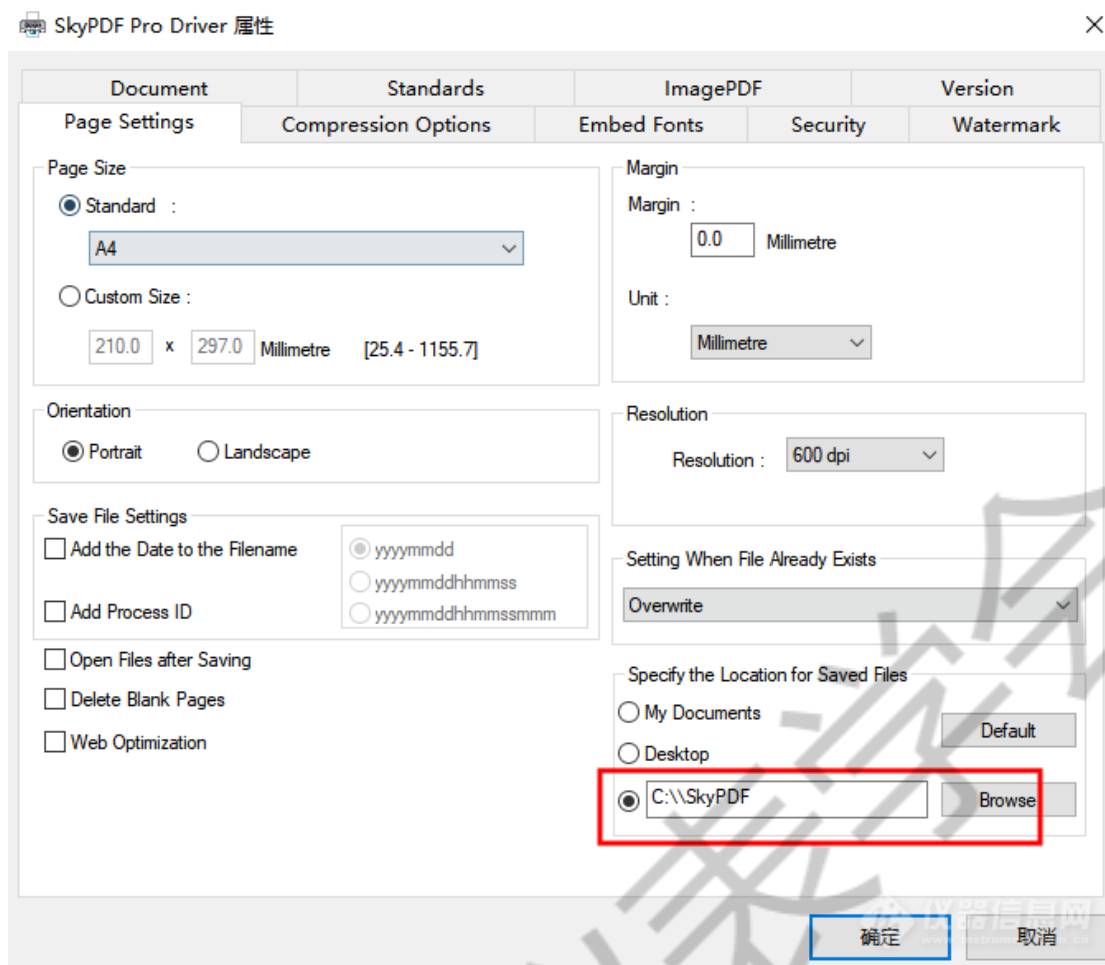

在打印机设置中，选择 SkyPDF Pro Driver，然后点击“属性”，还可以设置 PDF 文件的存储位置。

不管是纸质报告，还是 PDF 格式，使用了这个功能都可以事半功倍。其实所有的仪器厂家的软件功能都很强大，只是很多操作人员，都是略懂一二，只会基本的操作，不求甚解，殊不知会的功能多了，工作更轻松。