


岛津气相色谱工作站修改编辑批处理序列

阚士超


(新泰市检验检测中心, 山东 泰安 271200)

在色谱操作中，经常会碰见各种突发问题以及各种误操作等，很多时候需要修改正在运行中的样品队列。碰到这些情况有些工作人员只知道去停止批处理采集，然后再修改批处理队列。其实对于岛津色谱软件来说，有一个很好用的功能可以在不影响正在运行的批处理序列的情况下修改或者增加批处理队列。

对正在进样的批处理队列中添加样品，需要点击左侧的“编辑表/重新开始”，对批处理进行锁定，然后在批处理的表中正常编辑就可以，编辑完后对批处理点击“保存”，会提示你要不要解除锁定，点击解除就可以，这时候批处理序列的内容就成了修改后的队列了。

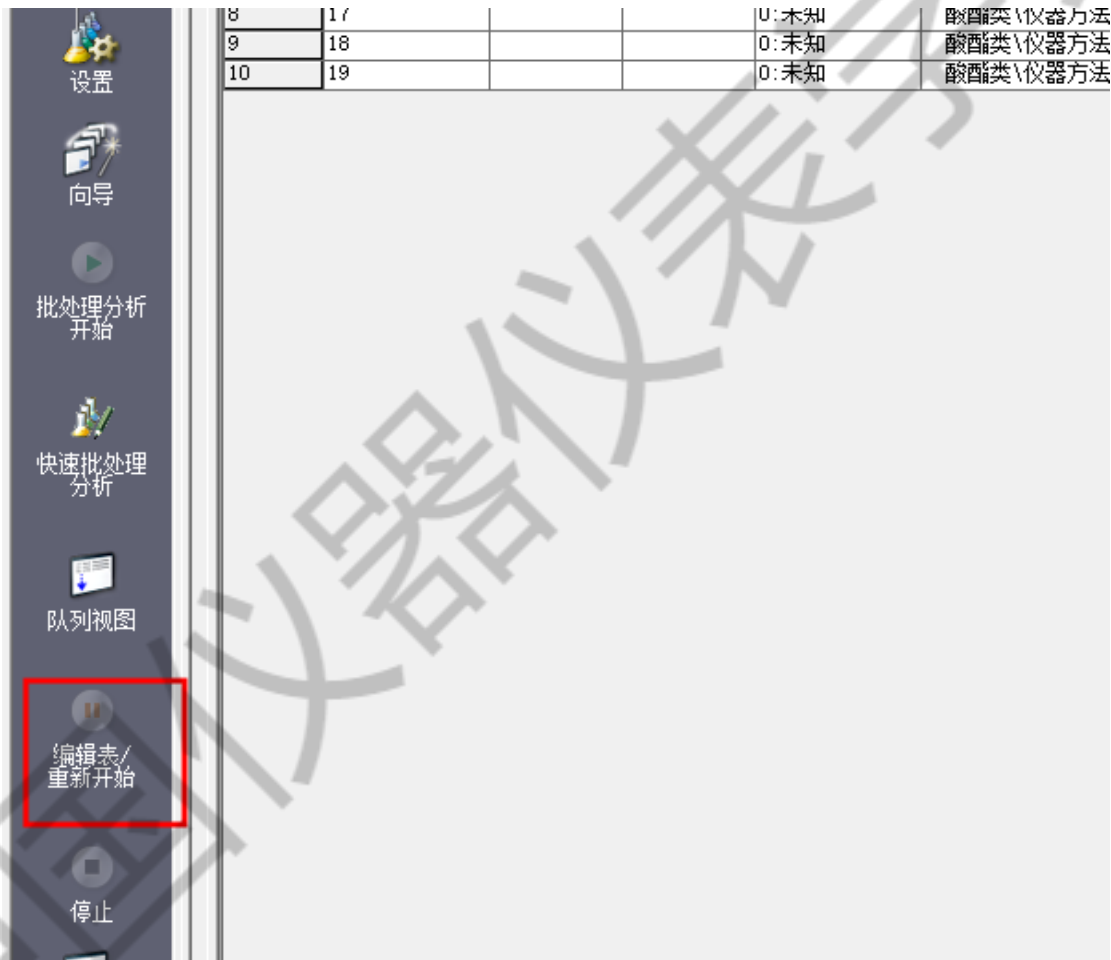

还可以新建一个批处理队列文件，然后在顶部选择“批处理”中，再选则“选择批处理文件登录到队列”，然后选择需要增加的批处理队列文件，然后就可以看到队列中就多了一个批处理，按照顺序处理数据。如果有多个批处理，还可以拖动批处理，设置批处理的顺序。

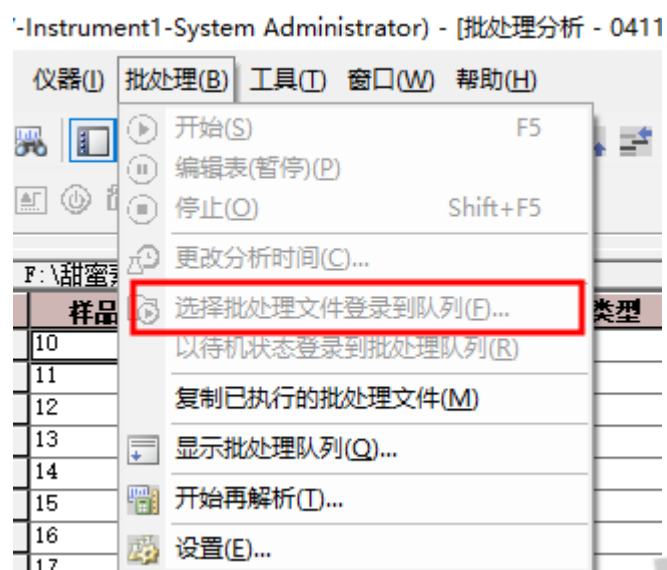

这样做的好处就是节省时间，不需要去暂停正在进样的样品，随意增加样品或者增加新的队列。当然如果要修改的样品已经跑完了，这时候谁也无法去修改了，只能是重新进样或者暂停后进行修改了。